

ビデオ軟性内視鏡

特許取得

ANIMALOOK



照度調整
機能付き

軟性内視鏡

挿入部が

わずか **1.6mm**



コデン株式会社



ANIMALOOK AL-4

アニマルックエーエル4

動物用医療機器届出番号:4動薬第1649号


アニマルックAL-4

- 口腔内や鼻腔内を観察
- 咽頭、食道、胃の観察
- 中耳内の観察
- 目視での気管挿管の挿入




軟性内視鏡で、挿入部が1.6mmと極限まで小さく致しました。10Frのカテーテルに挿入し胃の観察や、挿入ガイドを使って耳や鼻の観察が出来ます。また気管挿管チューブの挿入の確認に使えます。

● 付属品

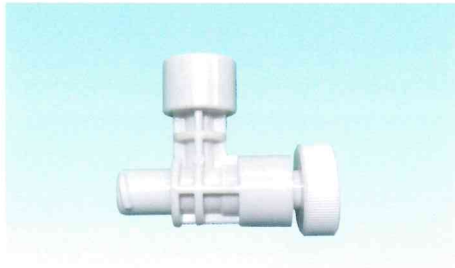

スコープコネクター

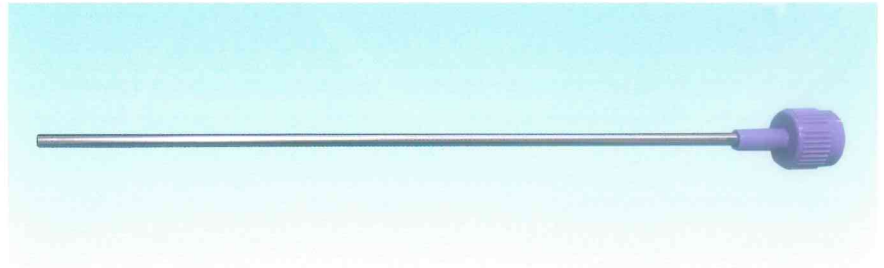

挿入ガイド

本 体	(長さ) 110mm × (幅) 26mm × (重量) 112g (挿入部を含む)、照度調整機能付き
挿 入 部	(長さ) 950mm (径) 1.6mm
カ メ ラ	CMOSカメラ16万画素、焦点深度5-50mm、視野角120°
U S B	ケーブル2m
ビューソフトウェア	Windows:カメラ、 MacOS:QuickTimePlayer
推 奨 P C	OS:Windows11/10/8、Macintosh (Mac10,10)以上 CPU:2.4GHz Core2DUO以上、RAM:4GB以上、USBポートタイプ:USB2



コデン株式会社

www.coden.co.jp
info@coden.co.jp

東京都豊島区巣鴨1丁目4番16号
TEL.03-5981-8611 FAX.03-5981-8878