

## 猫カテーテル



P.07

＜導尿カテーテル＞  
・縫合固定しないタイプ


## 猫カテーテル(固定板付)



P.08

＜導尿カテーテル＞  
・ソフト&フラットな固定板が猫にやさしい

## ウロステント

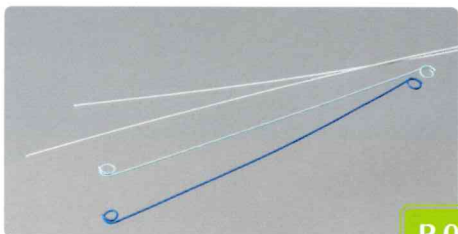

P.09

＜尿管ステントチューブ＞

## ガイドワイヤー



P.10

＜親水性ガイドワイヤー＞

### ■適用表 / 猫カテーテル適用表

	サイズ		性別・体重			用途	特徴	
			オス	メス 4kg以上	メス 4kg未満			
猫カテーテル	ストレート	3Fr	120mm	→	→	導尿、フラッシング	フラッシング専用で安価です	柔軟でコシのあるポリウレタン製で尿道損傷のリスクを軽減します
		4Fr	120mm	→	→			
	ピックテール	3Fr	120mm	→	→	導尿、留置	体表で固定しないので有効長使い分け不要です	
		4Fr	120mm	→	→			
猫カテーテル (固定板付)	先端開口	3Fr	120mm	100mm	80mm	導尿、フラッシング 留置	フラッシングから留置まで一本でOKです	
		4Fr	120mm	100mm	80mm			
	先端封止	3Fr	120mm	100mm	80mm	導尿、留置	スタイレットで高い挿入性を確保しています	
		4Fr	120mm	100mm	80mm			



# ガイドワイヤー

親水性

Ni-Ti

Tierrett ガイドワイヤー (動物用医療機器届出番号:28動薬第2112号)

動物専用設計の"親水性ガイドワイヤー"をお求めやすい価格で  
"尿管ステントの留置向け"に開発しました

- 症例にあわせて選べる2サイズをラインナップ
- 親水性コートが付与
- 優れた押し込み特性と柔軟性を兼ね備えたNi-Ti芯線を採用



## Tierrett†† ガイドワイヤーの特長をご紹介します

0.016インチ(2.1Frステント対応)  
0.018インチ(2.5Frステント対応)  
2サイズをラインナップ

特長  
1

優れた押し込み特性と柔軟性を  
兼ね備えた  
Ni-Ti芯線と親水性コートが挿入性を確保し  
ています

特長  
2

組織の損傷リスクを低減する  
アングルタイプを採用

特長  
3



### LINE UP <サイズ構成>

サイズ呼称(インチ)	外径	先端形状	有効長	品目コード	JANコード	対応ステント
0.016"	外径:0.41 単位:mm	アングル 形状	600mm	800-001-4718	4542187203899	Tierrett ウロステント 2.1Fr
0.018"	外径:0.46 単位:mm	アングル 形状	600mm	800-001-4495	4542187201666	Tierrett ウロステント 2.5Fr

1本/箱・EOG滅菌済