

# メトラン 動物用マルチモニター MV12



## 【製品仕様】

ECG	リードタイプ	3リード、5リード(オプション)
	ウェブフォーム	2CH、7CH、12CH
	脈波範囲	15~300BPM
温度	測定精度:	±0.1℃
	チャンネル	2CH
	分解能	0.1℃
RESP	測定方法	胸部インピーダンス法
	測定電極	リードI、II
	測定範囲	大動物:0~120bpm 中・小動物:0~150bpm
脈波	分解能	1bpm
	測定範囲	30~300bpm
	分解能	1bpm
NIBP	精 度	±3bpm
	測定方法	オシロメトリック
	NIBP精度	ANSI/AAMI SP10-2002, EN1060-4 準拠
SpO2	測定選択	大動物、中動物、小動物
	収縮期	大動物:40~260mmHg、中動物:40~160mmHg、小動物:40~130mmHg
	拡張期	大動物:20~220mmHg、中動物:20~120mmHg、小動物:20~100mmHg
AG100	脈波範囲	30~220bpm
	精 度	±2%
	操作モード	手動、自動、時間設定
SpO2	測定範囲	0~100%
	分解能	1%
	測定精度	±2%(70~100% 大動物、中動物 体動なし、低循環)
AG100	測定精度	±3%(70~100%、小動物、体動なし)
	測定精度	±3%(70~100%、体動あり)
	測定ガス	CO2, N2O, HAL, ISO, ENF, SEV, DES
AG100	表示時間	20秒
	サンプル流量	100ml/分

製造販売業者  
チャートウェルヘルスケア株式会社  
住 所 東京都文京区本郷4-1-7  
第2近江屋ビル5階



販売業者:お問合せ先  
株式会社メトラン  
住 所 埼玉県川口市川口2-12-18  
電 話 048-242-0333  
営業部ベタリナリ担当 M65-21-01




術前・術中から術後の生体情報はこれ1台にお任せください




# メトラン 動物用マルチモニター MV12

## 【特徴】

- MV12はコンパクトなボディに動物の生体情報のすべてを表示します。
- SpO2はMasimo®センサーを標準装備しています。
- 麻酔ガスモニター(別売)はコンパクト設計で場所を取りません。
- タッチスクリーンにより各パラメータは直感的に確認することができます。
- ファンクションキーによりダイレクトに設定できます。
- NIBPはSuntech®社モジュールを採用しています。

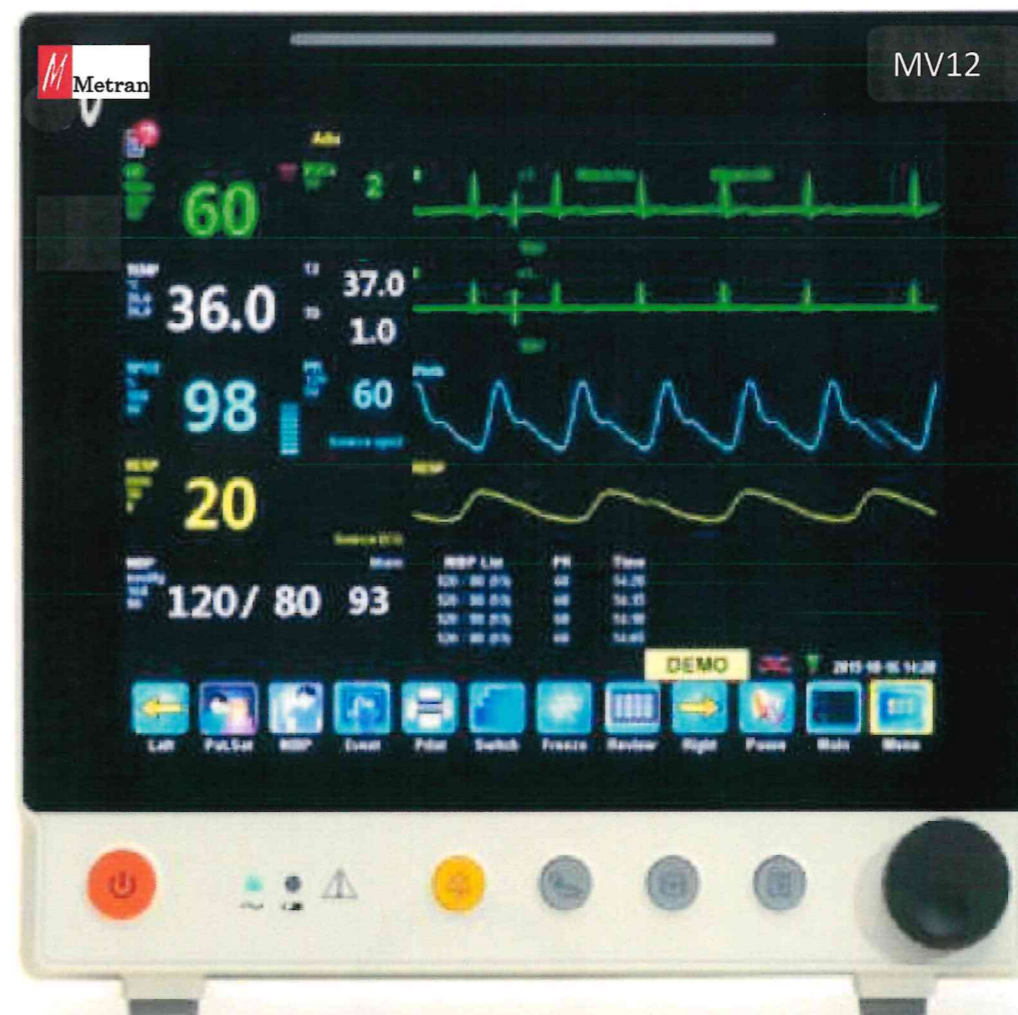

Masimo SpO2

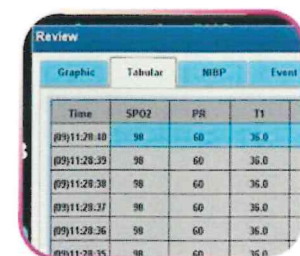

Graphical & Tabular Trend

- 480 Hours long trend
- 120 Mins short trend
- 10000 NIBP measurements
- 200 Alarm events

- バイタル表示の配置はお好みのレイアウトに変更できます。
- トレンド記録はデジタル(480h)、アラーム記録は200イベント
- サーマルレコーダー標準装備

- AG100麻酔ガスモジュール  
専用ポートに接続するだけでいつでもグレードアップできます。
- Masimo麻酔ガスモジュール (ISA AX+) ハイグレードタイプもラインナップ

# メトラン 動物用マルチモニター MV12



【本体】



MV12



麻酔ガスモジュール  
AG100



麻酔ガスモジュール  
Masimo ISA AX+

【附属品】

ECG 3リード(クリップ・ワニ口兼用)


Masimo SpO2センサー(標準)



Suntech NIBPカフセット



温度プローブ

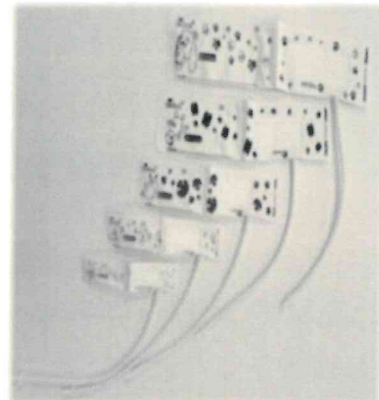

届出番号 6動薬第4083号

製造販売業者

チャートウェルヘルスケア株式会社

住所 東京都文京区本郷4-1-7  
第2近江屋ビル5階



販売業者:お問合せ先

株式会社メトラン

住所 埼玉県川口市川口2-12-18

電話 048-242-0333

営業部ベタリナリ担当

M65-21-01

# メトラン 動物用マルチモニター MV12



【製品構成】

商品コード	販売名	MV12	MV12AG100	MV12MASIMO	*セット付属
MA51287401001	動物用マルチモニターMV12 (Basic)	1	-	-	*付属
MA51287401002	動物用マルチモニターMV12+AG100	1	1	-	*付属
MA51287401003	動物用マルチモニターMV12+マシモISA	1	-	1	*付属
040.01.000367-00	MV12用 NIBPカフセット (5サイズ)	1	1	1	*
040.01.000276-01	MV12用 NIBPケーブル	1	1	1	*
040.01.001058-00	MV12用 3リードECGケーブル(クリップ・ワニ口兼用)	1	1	1	*
040.01.000988-00	MV12用 マシモSPO2センサクリップ	1	1	1	*
040.01.000381-00	MV12用 マシモSpO2センサ(Yタイプ)	1	1	1	*
040.01.000552-00	MV12用 マシモSpO2延長ケーブル	1	1	1	*
040.01.000277-00	MV12用 温度プローブ	1	1	1	*
040.01.000012-00	MV12用 グランドケーブル	1	1	1	*
040.01.000063-00	MV12用 記録紙(2巻)	1	1	1	*
麻酔ガスモニター消耗品					
040.01.000915-00	MV12用 AG100サンプリングチューブセット	-	2	-	*
040.01.000916-00	MV12用 AG100ウォータトラップ	-	2	-	*
040.01.000636-00	MV12用 マシモAGサンプリングチューブ	-	-	2	*
040.01.000349-00	MV12用 マシモ延長ケーブル	-	-	1	*
オプション					
040.01.000279-00	MV12用 5リードECGケーブル(クリップ・ワニ口兼用)	1	1	1	
040.01.000715-00	MV12用 3リードECGケーブル(ワニ口)	1	1	1	

【製品仕様】

	MV12 AG100	MV12 Masimo	MV12 (Basic)
寸法(mm)	310×292×174(幅×高さ×奥行き)		
重量(kg)	10 kg		
電源	入力電圧:100~240V、入力電流:1.0~0.5A 50/60Hz		
内部電源	リチウムイオン電池		
バッテリー容量	2600mAh(最大供給時間:2~3時間)		
充電時間	電源ON状態で約5~6時間		
サーマルレコーダー	標準装備		
ディスプレイ	カラーTFT液晶12.1インチタッチスクリーン(800×600)		
麻酔ガスモジュール	AG100サイドストリーム	MasimoISA AX+サイドストリーム	-

【価格情報】

商品コード	商品名	数量	単位	価格	備考
MA51287401001	動物用マルチモニターMV12(Basic)	1	式	1,600,000	
MA51287401002	動物用マルチモニターMV12(AG100)	1	式	2,600,000	
MA51287401003	動物用マルチモニターMV12(Masimo)	1	式	3,200,000	
-	ECG3リード1個、NIBP1式、温度センサ1本、SPO2 センサプローブ1セット、グランドケーブル1本、記録紙2個、	1	式	-	